

# WELCH ALLYN RETINOSCOPIO ELITE™



## Iluminación superior en un Prestigioso Nuevo Retinoscopio

El impresionante haz de luz del Retinoscopio Elite de Welch Allyn hace más fáciles que nunca las refracciones debido a su franja más brillante, nítida y definida. Características como su cómodo anillo externo de enfoque, óptica sellada, y un filtro polarizado opcional hacen del retinoscopio Welch Allyn unos de los instrumentos más sencillos y cómodos de usar.

**WelchAllyn®**


Advancing Frontline Care™

# ILUMINACIÓN SUPERIOR PARA PRESTACIONES SIN IGUAL

Durante más de 85 años, los instrumentos de diagnóstico Welch Allyn han establecido los niveles de prestaciones superiores y valor añadido. Con la introducción del Retinoscopio Elite Welch Allyn estos estándares han vuelto a subir una vez más. Este prestigioso instrumento ofrece una combinación de altas prestaciones nunca antes vistas en un retinoscopio.

Esto significa la capacidad de realizar exámenes más fácilmente y con mayor precisión. Las mejoras incorporadas al Retinoscopio Elite Welch Allyn se han logrado con cambios en el diseño interno, incluyendo cambios en el tamaño de aberturas, el uso de nuevas lentes con tratamiento anti-reflectante y una terminación interna para evitar deslumbramiento.

## LUMINOSIDAD FRENTE RETINOSCOPIO ESTÁNDAR

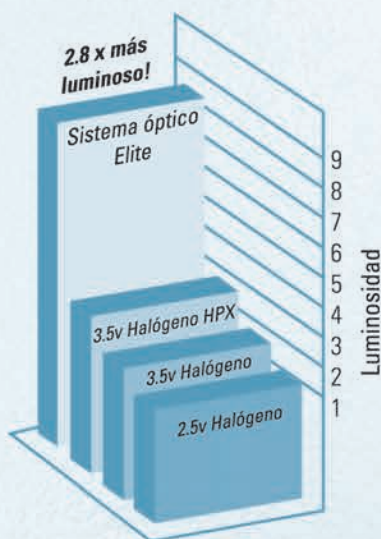

### Sistema Óptico Elite

El sistema óptico Elite incluye superior calidad de franja con 2,8X más brillo que un retinoscopio estándar

#### Patentes EEUU

5,189,449 • 5,200,772 • 5,202,710

#### Patente de Lámpara

5,359,262

### Ínter cambiabilidad a retinoscopia de punto

Simplemente inserte una bombilla de filamento de punto en lugar de la de filamento de franja, y el retinoscopio Elite Welch Allyn se convertirá en un retinoscopio de punto. Esto le permitirá realizar retinoscopia de punto sin necesidad de un segundo retinoscopio.

#### Información de pedido

18245	Retinoscopio Elite Welch Allyn
71020-C	Mango convertible-Recargable de alimentación
71670	3.5v Mango recargable para cargador de sobremesa.
71902	Mango con batería Ion-litio y modulo cargador a CA
71932	Mango con batería Ion-litio con adaptador para cargador de sobremesa antiguo.
08200	Bombilla Halógena HPX™ de franja
08300	Bombilla Halógena HPX de punto

### Franja de Calidad superior

Posibilita más fáciles y rápidas refracciones - incluso en pacientes con pupilas pequeñas

### Filtro Polarizante lineal cruzado

Elimina el 99% del fuerte reflejo de las lentes correctoras, ayudando a realizar un examen más preciso con un solo toque.

### Anillo externo para enfoque

El anillo externo con giro continuo para enfoque mejora la comodidad y facilidad de enfoque independientemente del tamaño de su mano, o como acostumbre a enfocar

### Diseño libre de polvo

Construcción especial que mantiene la óptica limpia para unos exámenes más efectivos.



Welch Allyn Latinoamérica  
11300 NW 41st Street Miami, FL 33718 USA  
Tel. 305.669.9003 Fax 305.669.8951  
www.welchallyn.com

SM2231LA Rev C

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™